


Conseils pour la mise en place d'un manchon silicone tibial 3S



1 Pour faciliter la mise en place du manchon, mettre du talc de droguerie du côté du motif.

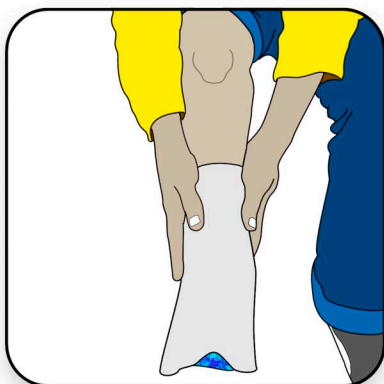


2 Bien orienter le manchon en faisant attention de ne pas emprisonner d'air au fond.




3 Commencer à dérouler le manchon moignon en extension puis fléchir le genou pour une meilleure répartition des plis.




4 Continuer à dérouler le manchon jusqu'en haut, et vérifier l'orientation du plongeur...

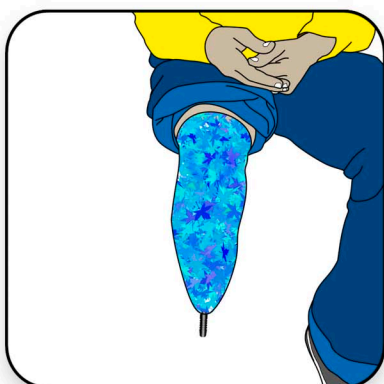


5 ...qui doit être dans le prolongement du moignon dans les deux plans: face/profil.

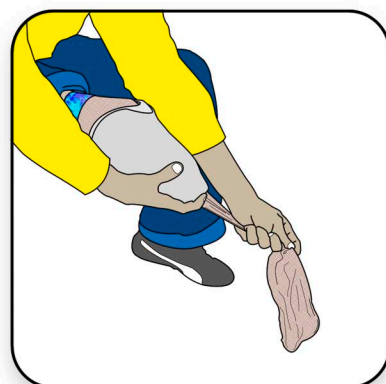

6 Afin de faciliter la mise en place du manchon mousse et de son enveloppe semi-rigide, enfile un tissu fin sur le manchon en silicone.

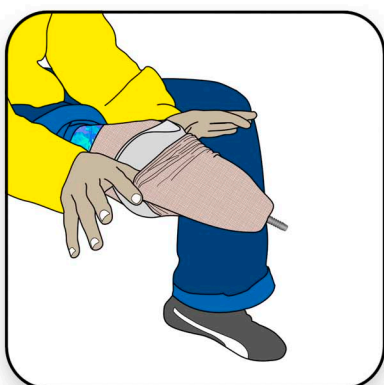

7 Vérifier la bonne mise en place du manchon et retourner le surplus de tissu sur toute sa hauteur.

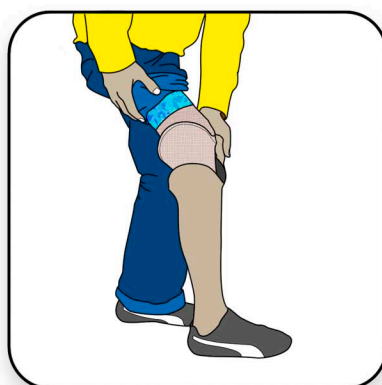

8 Le chaussage de la prothèse se fait, dans la mesure du possible, debout et genou tendu. Faire quelques pas et s'assurer que le plongeur soit correctement enclenché.

- Mettre le manchon sur une peau propre et sèche.
- Ne pas utiliser du talc de pharmacie qui devient collant, mais du talc de droguerie, sans excès, il est nécessaire à la mise en place du manchon et aussi de la prothèse.
- Laver le manchon tous les jours au savon neutre (type savon de Marseille) et bien le sécher.
- Désinfecter le manchon régulièrement avec un savon antiseptique, (1 fois par semaine).
- Quitter le manchon pour dormir afin de laisser respirer la peau.
- Penser à faire renouveler le manchon au bout d'un an environ si celui-ci se dégrade.